

STERISEPT

Ready to Use



Alkoholfreies Desinfektions- und Reinigungsmittel für Medizinprodukte

- frei von Alkoholen, Aldehyden, Phenolen und PHMB
- gute Materialverträglichkeit
- für alkoholempfindliche Oberflächen
- kombiniert Reinigung und Desinfektion

Sterisept Ready to Use ist ein alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel für invasive und nicht-invasive Medizinprodukte und alkoholempfindliche Oberflächen. Es enthält keine Alkohole, Aldehyde oder PHMB und ist für alle wasserverträglichen Oberflächen im medizinischen Bereich geeignet. Aufgrund einer speziell entwickelten Rezeptur hat Sterisept Ready to Use eine gute Materialverträglichkeit mit gleichzeitig guten Reinigungseigenschaften. Das Produkt wird in einer sehr praktischen und wirtschaftlichen Verpackung angeboten.

Sterisept Ready to Use hat ein breites Spektrum an bakterizider (inkl. MRSA, VRE), mykobakterizider (inkl. Mycobacterium avium und Mycobacterium terrae), fungizider und levurozider Wirkung. Das Produkt ist auch gegen Viren (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Rota und Noro) und Sporen (inkl. Clostridium difficile) aktiv.

Sterisept Ready to Use eignet sich auch zur Vordesinfektion und Benetzung kontaminierter chirurgischer Instrumente. Eine solche Vorsterilisationsbehandlung von chirurgischen Instrumenten ist ein wichtiger Schritt, um ein effektives und sicheres Sterilisationsverfahren zu gewährleisten. Es hilft die mikrobielle Kontamination zu reduzieren und entfernt außerdem Blut, Gewebe und andere organische Rückstände von den Instrumenten.

Sterisept Ready to Use hat eine gute Materialverträglichkeit bei Oberflächen und Instrumenten aus Edelstahl, Glas, Aluminium, Kupfer, Messing, Keramik, PVC, Gummi, Kunststoffen, Silikon, Acryl und Plexiglas.

Sterisept Ready to Use gehört zur Gefahrenklasse IIb, gemäß Regel 15, Anhang IX von Medizinprodukterichtlinie 93/42/EEC.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Alkoholfreies, materialschonendes Schnelldesinfektionsmittel zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Geräten und Oberflächen.

- invasive und nicht-invasive medizinische Geräte
- patientennahe Oberflächen wie Bettgestelle und Nachttische
- Untersuchungsliegen und Matratzen
- Operationstische und angrenzende Arbeitsflächen
- in den Krankenwagen und in der Physiotherapie
- Inkubatoren, Badewannen und Wägen
- Displays, Tastaturen und Bedienfelder

VERWENDUNG:

Sterisept Ready to Use kann durch Wischen oder Sprühen auf die Oberflächen aufgetragen werden. Flächendesinfektion durch Wischen: sprühen Sie eine ausreichende Menge Sterisept Ready to Use auf ein geeignetes Einweg-Vliestuch und wischen Sie damit die Flächen ab.

Flächendesinfektion durch Sprühen: Spühen Sie Sterisept Ready to Use aus mindestens 30 cm Entfernung auf die Oberflächen und verteilen Sie es mit einem Tuch. Dies ist eine empfohlene Anwendung für schwer zugängliche Oberflächen. Stellen Sie eine vollständige Benetzung sicher. Die Kontaktzeit beträgt mindestens 60 Sekunden oder je nach erforderlicher Wirksamkeit (siehe Tabelle).

Behandelte Oberflächen müssen nicht gespült werden. Vorbehandlung von chirurgischen Instrumenten vor der Sterilisation: Nachdem die gebrauchten und zerlegten Instrumente in die Schale oder den Behälter gelegt wurden, sprühen Sie Sterisept Ready to Use auf die kontaminierten Instrumente, um zu verhindern, dass sich Mikroben vermehren und der Schmutz auf den Instrumenten antrocknet. Fahren Sie mit den nächsten Schritten der Aufbereitung fort.

Befolgen Sie immer die Aufbereitungsanweisungen des Instrumentenherstellers.

MIKROBIOLOGIE:

WIRKSAMKEIT	TESTMETHODE	KONTAKTZEIT
Bakterizid (inkl. MRSA, VRE)	EN13727, EN14561, EN13697	1 min
Hefetötend	EN13624, EN13697	1 min
Bakterizid und levurozid	EN14476	0,5 min
Alle behüllten Viren	EN14476	0,5 min
Mykobakterizid	EN14348	5 min
Aspergillus brasiliensis	EN13624	10 min
Clostridium difficile	EN13704	15 min

Registriert in der Staatlichen Agentur für Arzneimittel, Fakultät für Medizinprodukte.
Besitzt CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie über Medizinprodukte (MDD).



ZUTATEN:


100 g Produkt enthalten Wirkstoffe: Didecyl-Dimethyl-Ammoniumchlorid (DDAC)
0,45g ; N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 0,45 g

BASIS-UDI: 4742124000014SA

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Inhalt und/oder Behälter gemäß den Vorschriften für gefährliche Abfälle bzw. Verpackungen und Verpackungsabfälle entsorgen.

PACKAGING:

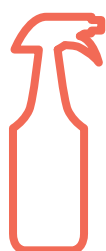

1000 ml spray bottle



5000 ml canister



AS Chemi-Pharm
Tänassilma tee 11, Harju maakond, 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

IMPORTEUR:
Multiwork & Multitrade GmbH
Urgen 65b, 6500 Fließ
www.multiwork.at - office@multiwork.at